

BD Spinal™

BD Spinal™

Agulhas Raquidianas Ponta Quincke


- Paredes finas proporcionam maior velocidade no retorno do líquido e melhor fluxo do agente anestésico durante a injeção.
- Encaixe canhão/mandril que orienta a direção do bisel, fixa o mandril evitando o seu deslocamento durante a punção e permite fácil desconexão após correto posicionamento da agulha.
- Canhão translúcido que proporciona rápida e clara visualização do líquido.
- Mandril ajustado à agulha reduz a possibilidade de remoção de tecidos e dobras durante a punção.
- Látex free.

BD Spinal™ • Agulhas Ponta Quincke

Código	Descrição	Cor	Qtd. por Cartete	Qtd. por caixa de embarque
408373	20G 3 1/2"	amarela	25	100
408375	22G 2-1/2"	branca	25	100
408377	22G 3 1/2"	branca	25	100
408379	25G X 3 1/2"	azul	25	100
408380	26G 3 X 1/2"	bronze	25	100
408381	27G X 3 1/2"	cinza	25	100
405211	20G X 6" (LONGA)	amarela	10	50
405149	22G X 7" (LONGA)	branca	10	50
405078	25G X 2" (PED)	azul	25	100



Ajudando as pessoas a viverem vidas saudáveis

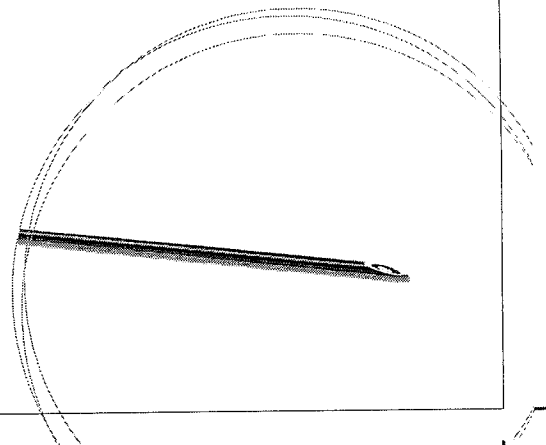

Consulte a BD para informações sobre produtos de segurança e seus registros ANVISA. BD, BD Logo são marcas registradas da Becton, Dickinson and Company. © 2012 BD Registro ANVISA 10033430144 Agulha Técnica Descartável para Anestesia Regional e 10033430353 BD Agulha Técnica Descartável para Anestesia Regional.

Rua Alexandre Dumas, 1976
 São Paulo - SP - 04717-004
 Tel: 0xx11 5185-9685
 Fax: 0xx11 5181-8633
 http://www.bd.com/br



Razão Social	Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
C .N. P. J.	21.551.379/0007-93
Inscr.Estadual	112.213.751.115
Endereço	Escritório São Paulo Rua Alexandre Dumas, 1976 Chácara Santo Antonio São Paulo - SP
Produto	BD SPINAL
Catálogo	408373 - BD SPINAL 20G 3 ½" 408375 - BD SPINAL 22G 2 ½" 408399 - BD SPINAL 22G 3 ½" 408379 - BD SPINAL 25G x 3 ½" 408380 - BD SPINAL 26G 3 x ½" 408381 - BD SPINAL 27G x 3 ½" 405211 - BD SPINAL 20G x 6"(LONGA) 405149 - BD SPINAL 22G x 7"(LONGA) 405078 - BD SPINAL 25G x 2"(PED)
Descrição	<p>Agulha para Anestesia Raquidiana descartável, tipo Quincke, sem imperfeições ou rebarbas ,previnindo a dilaceração dos tecidos na duramater e reduzindo a incidência de cefaléia pós raqui.</p> <p>Cânulas de paredes finas com maior diâmetro interno oferecendo um maior velocidade de refluxo do liquor, confirmando o correto posicionamento do bisel da agulha no espaço raquidiano, bem como facilita a injeção do anestésico durante o procedimento. Mandril / Estilete: Perfeitamente ajustado à parede interna da cânula, que garante a maior resistência contra dobra e quebra durante procedimento, bem como evita acúmulo de tecido durante a inserção da agulha e deposito no espaço raquidiano.</p> <p>Canhão: Canhão luer lok com visor translúcido e internamente cônico garantindo conexão segura e perfeita visualização do liquor. Facilita também a reinserção do mandril. De formato universal possui uma fenda devidamente construída e localizada a fim de encaixar perfeitamente o canhão ao mandril, proporcionando adequado acoplamento entre os dois para evitar deslocamento indevido do conjunto durante o seu uso. Protetor plástico rígido do conjunto Agulha e Mandril, fornecendo total proteção e integridade do bisel até o momento do uso.</p>
Fabricante	Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Origem	Brasil
Embalagem	Individual, de papel grau cirúrgico e filme plástico, Esterelizado por óxido de etileno, proporcionando abertura asséptica de transferência. Contém dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, nº de lote,data de esterilização, validade do produto e Registro no Ministério da Saúde.
Classificação Fiscal	9018.32.19
Nº Registro	10033430144
Validade	5 anos

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.		
CNPJ	21.551.379/0001-06	Autorização	1.00.334-3
Produto	AGULHA TECNICA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA REGIONAL		

Modelo Produto Médico
BD Tactile Epidural Needle Tuohy 17G x 3 ½"; BD Tactile Epidural Needle Tuohy 18G x 3 ½".
BD Spinal 18G x 3 ½"; BD Spinal 18G x 6"; BD Spinal 19G x 3 ½"; BD Spinal 20G x 3 ½"; BD Spinal 20G x 6"; BD Spinal 22G x 1 ½"; BD Spinal 22G x 2 ½"; BD Spinal 22G x 3 ½"; BD Spinal 22G x 7"; BD Spinal 25G x 1"; BD Spinal 25G x 2"; BD Spinal 25G x 3 ½"; BD Spinal 26G x 3 ½"; BD Spinal 27G x 3 ½"; BD Spinal 29G x 3 ½"; BD Whitacre 22G x 3 ½"; BD Whitacre 25G x 1 ½"; BD Whitacre 25G x 3 ½"; BD Whitacre 27G x 1 ½"; BD Whitacre 27G x 3 ½"; BD Whitacre 27G x 4 11/16"; BD Weiss 16G x 3 ½"; BD Weiss 17G x 3 ½"; BD Weiss 17G x 5"; BD Weiss 18G x 2"; BD Weiss 18G x 3 ½"; BD Weiss 18G x 5"; BD Weiss 20G x 2"; BD Tuohy 17G x 3 ½"; BD Tuohy 18G x 3 ½"; BD Tuohy 20G x 3 ½".
BD Spinal 18G x 3"; BD Spinal 19G x 3"; BD Spinal 20G x 1 ½"; BD Spinal 20G x 2 ½"; BD Spinal 20G x 3"; BD Spinal 22G x 3" BD Spinal 22G x 5"; BD Spinal 23G 3 ½"; BD Spinal 23G x 3 ½" TW; BD Spinal 25G x 3"; BD Spinal 25G x 4 11/16"; BD Spinal 29G x 4 11/16".
BD Tuohy 17G x 3 ½" TW; BD Tuohy 18G x 3 ½" TW; BD Tuohy 20G x 3 ½" TW.
BD Weiss 17G x 3 ½" TW; BD Weiss 17G x 5" TW; BD Weiss 20G x 2" TW; BD Weiss 20G x 3 ½".
BD Whitacre 24G x 3 ½"; BD Whitacre 24G x 3 ½" TW; BD Whitacre 25G x 3 ½" TW; BD Whitacre 25G x 5" TW; BD Whitacre 25G x 4 11/16; BD Whitacre 27G x 5".
BD Tactile Epidural Needle Weiss 17G x 3 ½"; BD Tactile Epidural Needle Weiss 18G x 3 ½".

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Agulhas Descartáveis
Registro	10033430144
Processo	25000.021955/9782
Fabricante Legal	• FABRICANTE: BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA. - BRASIL
Classificação de Risco	III - ALTO RISCO
Vencimento do Registro	02/10/2027
<input type="button" value="Voltar"/>	



BD

 **BD Spinal**

Agulha Técnica Descartável para Anestesia Regional / Aguja Técnica Descartable para Anestesia Regional

Agulha com Ponta Tipo Quincke ESTÉRIL
Aguja con Punta Tipo Quincke

Instruções de uso: Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesiologista.

Instrucciones de Uso: Existen diversas técnicas para aplicación de anestesia. Las agujas técnicas para anestesia regional deben ser usadas de acuerdo con la técnica utilizada por el médico anestesiologista.

Reg. ANVISA Nº10033430144 - Leg. Único ANMAT Nº 634
Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias
www.ctav.com.br ctav@bd.com.br bd.com.br/nd brasilera/brasilera

8085047

27Gx3¹/₂"

LOT:2354213

CAT. 408381

FAB.:01/2023

VAL.:12/2027

25 UNID.



(02) 27891463005664 (17) 271200 (10) 2354213 (37) 0025



- Apirógênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Proibido reprocessar.
Destruir após o uso. Conservar em local seco e limpo.
Validade: 5 anos após a fabricação.

- Apirógeno. Esterilizado por óxido de etileno.
Solo usar si el embalaje unitario estuviere intacto.
Producto de un solo uso. Prohibido reprocessar.
Destruir después de usar. Conservar en lugar seco y limpio.
Validez: 5 años después de fabricado.

- Nonpyrogenic. Sterilized by ethylene oxide.
Use only if single package is undamaged.
Single use product. Do not reprocess. Destroy after use.
Store on dry and clean place.
Expiration date: 5 years after manufacturing.

BD y el logotipo de BD son marcas comerciales de Becton, Dickinson and Company.
© 2019 BD. Reservados todos los derechos.

BD e o logotipo BD são marcas comerciais da Becton, Dickinson and Company.
© 2019 BD. Todos os direitos reservados.

BD and the BD Logo are trademarks of Becton, Dickinson and Company.
© 2019 BD. All rights reserved.

STERILE EO